

维格斯 WD360熔蜡仪

石蜡包埋的得力助手



为标本量大、量少或临时性的
包埋工作，提供完美的解决方案

实用新型专利号：ZL 2012 2 0098265.6

产品特性

改善石蜡质量的工具

WD360熔蜡仪熔化石蜡后仪器自动保持恒温，让石蜡持续保持液化状态有助于将石蜡中的空气和水分逐步蒸发，杂质沉淀，从而提高石蜡的纯度及韧性，让蜡块切片更流畅且连片性好。

包埋机的扩展蜡缸

包埋机的蜡缸容积有限，对于标本量大的医疗机构，WD360熔蜡仪能配合包埋设备持续提供液态石蜡，提高包埋的工作效率。

经济实用的包埋设备

对于标本处理数量较少或临时性的医疗机构，WD360熔蜡仪可代替包埋机的部分功能。病理技师可直接将组织包埋模放于WD360熔蜡仪出蜡口接蜡进行包埋工作，让您花最小的成本，得到最高的效益。

公司简介

维格斯集团有限公司是一家集研发、制造于一体的专业生产商。集团公司拥有专业的技术人才，先进的研发设备，高端的研发实验室和设施完善的生产车间，积极为广大客户提供高效、稳定、可靠的病理仪器、耗材及试剂。

Wexis

WD360熔蜡仪

产品性能



6L大容量铝合金熔蜡缸，
一次熔化4.5kg固体石蜡。




微电脑控制加热温度，
持续加热并且准确恒温。



出蜡龙头单独加热，
保证流蜡畅通，不堵蜡。



出蜡龙头内置过滤网，
阻止杂质进入组织蜡块。

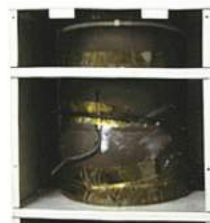

内部加装隔热防护，
使用更安全。

规格参数

外形尺寸	248×289×460 (mm)
重量	7.7Kg
熔蜡缸容量	6L
可熔固体蜡重量	4.5Kg
输入电源	AC230V 50Hz
额定功率	410W
待机功率	<10W
设定温度	室温-99℃可调
工作环境温度	0℃-40℃
可流蜡时间	<10分钟

订货详情

订货号	360-00-00
型号	WD360
名称	WD360熔蜡仪
相关配件	主机 1台 熔蜡缸盖 1件 电源线 1根 使用说明书 1本
产品认证	CE 质检认证单位 CTS

维格斯仪器系列包括



FL220 漂/烤片仪



DR230 烤片仪



TR302 修蜡仪

生产商：维格斯集团有限公司
地址 / 香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室
电话 / 852-2567-2882 传真 / 852-2567-6333

中国办事处：广州维格斯生物科技有限公司
地址 / 中国广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路四号 (邮编: 511388)
电话 / 8620-8779 3718 传真 / 8620-8779 3728
www.wexisgp.com