


Wexis

DR230 烤片仪

宽敞的
烤片台面

机身
超薄、轻巧

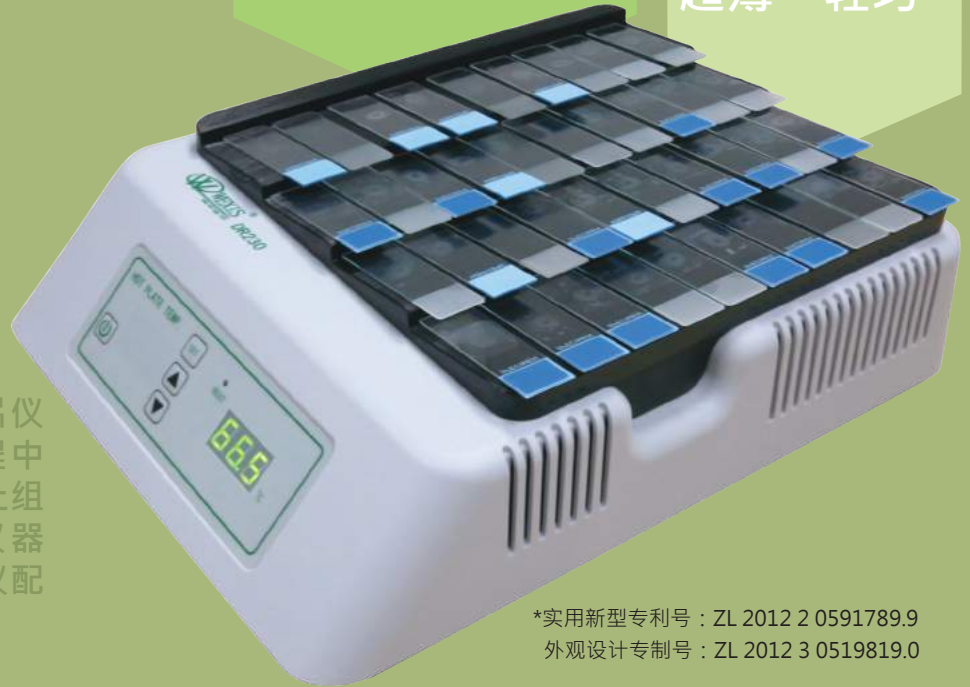

Wexis DR230烤片仪，是病理工作流程中用于烘烤载玻片上组织切片的重要仪器。通常与漂片仪配合使用。

*实用新型专利号：ZL 2012 2 0591789.9
外观设计专利号：ZL 2012 3 0519819.0

内置微电脑精准控制加热系统

- 用户可根据需要自行调节加热温度，彻底烤干漂片后，载玻片上残留的水分，使染色效果更佳。

独特的“堆叠式”设计

- 宽敞的烤片台面方便用户拿取或摆放载玻片。4个台面倾斜式设计使烤片效果更彻底，同时又可避免用户接触烤片台面时带来的意外灼伤。


“堆叠式”
烤片台面由4个
倾斜面构成

微电脑精准
控制加热系统

维格斯集团有限公司

是一家集研发、制造于一体的专业生产商，集团公司拥有专业的技术人才，先进的研发设备，高端的研发实验室和设施完善的生产车间，积极为广大客户提供高效、稳定、可靠的病理仪器、耗材及试剂。

大容量烤片台面最多可同时烤48张载玻片。

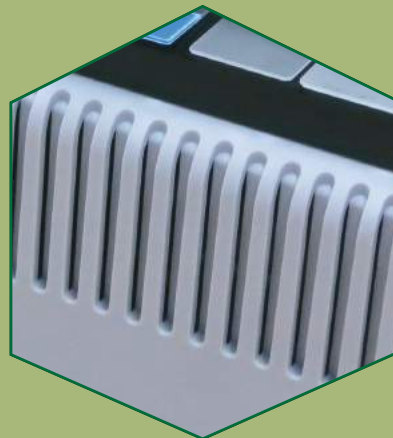

特殊条状的防水绝缘外壳及元器件无外露设计，机身边缘平滑无棱角，使用更安全、操作更舒适。



LED数字显示屏，温度0~99°C可调，关机自动保存参数设置。

精准的温度控制系统能根据用户所需，自动升温至所设温度。

技术参数

外型尺寸	415mm*310mm*120mm
烤片台面积	295mm*270mm
重量	6.2Kg
输入电压	AC220~50Hz 0.3A
额定功率	300W
温度显示范围	0°C - 99°C
温度默认值	H: 70°C ; L: 68°C
烤片温度	室温 - 99°C
准确度	温度设定 ±2°C
到达设定温度时间	10-15mins
以上规格摄取	室温 25°C
产品认证	CE 质检认证单位



订货详情

订货号	230-00-00
型号	DR230
名称	DR230 烤片仪
相关配件包括	主机 1台 电源线 1根 使用说明书 1本
备注	图片仅供参考，具体以实物为准。

维格斯小仪器系列



TR302 修蜡仪



FL220 漂烤片仪



WD360 熔蜡仪

生产商: 维格斯集团有限公司
 地址 / 香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室
 电话 / 852-2567-2882 传真 / 852-2567-6333
 中国办事处: 广州维格斯生物科技有限公司
 地址 / 中国广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路四号 (邮编: 511388)
 电话 / 8620-8779 3718 传真 / 8620-8779 3728
www.wexisgp.com

