

Wexis

Wexis FL220 漂烤片仪是病理工作流程中非常重要的辅助工具，广泛用于医学实验室、科研机构及组织学实验室的组织切片、病理性调查及分析的玻片制备中。

漂烤片一体化

微电脑
精确控温

漂片烤片一体化设计

- 漂片功能、烤片功能相互独立，由不同的控制面板精确控制

分离式
铝合金水浴槽

微电脑精确控温

- 精确控制和温度自动调节
- 温度调节范围：0~99℃
- 漂片、烤片温度分别独立控制，LED数字化显示参数，用户可设定自动存储



人体工程学
设计

维格斯集团有限公司

是一家集研发、制造于一体的专业生产商，集团公司拥有专业的技术人才，先进的研发设备，高端的研发实验室和设施完善的生产车间，积极为广大客户提供高效、稳定、可靠的病理仪器、耗材及试剂。



FL220 漂烤片仪

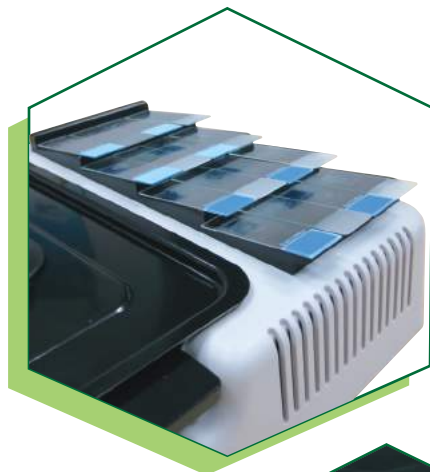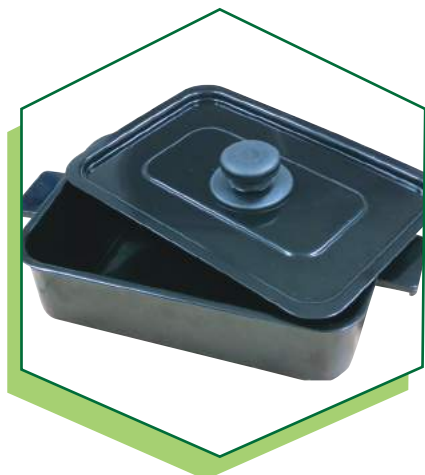

分离式水浴槽设计，让水更换或清洁变得如此简单，维护极为方便。

“叠加式”烤片台设计，拥有4个斜面平台，最多可一次性烤片16张。

铝合金水浴槽和烤片台表面均进行了黑色涂层处理，强烈的颜色对比让石蜡切片更易观察。

采用人体工程学设计,机身小巧轻薄，40°倾斜薄膜按键面板，让操作更舒适。



特殊的PE条状(设计外壳，防水绝缘，让用户使用更安全、更轻松。

技术参数

外型尺寸	415mm*310mm*120mm
水浴槽面积	220mm*145mm
烤片台面积	248mm*107mm
重量	5.45Kg
输入电压	AC220~50Hz 0.3A
额定功率	260W (漂片-200W;烤片-60W)
烤片温度	室温 - 99°C
烤片准确度	温度设定 ± 2°C
漂片温度	室温 - 99°C
漂片准确度	温度设定 ± 2°C
到达设定温度时间	<30mins
以上规格摄取	室温 25°C
产品认证	CE 质检认证单位



订货详情

订货号	220-00-00
型号	FL220
名称	FL220漂烤片仪
相关配件包括	主机 1台 水浴槽 1件 水浴槽盖 1件 电源线 1根 使用说明书 1本
备注	图片仅供参考，具体以实物为准。

维格斯小仪器系列



TR302 修蜡仪



DR230 烤片仪



WD360 熔蜡仪

生产商: 维格斯集团有限公司
 地址 / 香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室
 电话 / 852-2567-2882 传真 / 852-2567-6333
 中国办事处: 广州维格斯生物科技有限公司
 地址 / 广州市增城新塘沙浦银沙工业区银沙二路4号 (邮编: 511388)
 电话 / 8620-8779 3718 传真 / 8620-8779 3728

www.wexisgp.com