

Wexis



维格斯取材台 PW900

Wexis Grossing workstation PW900

本产品主体采用SUS-304不锈钢，台面采用SUS-316不锈钢，主体钢板厚度为1.2MM，台面钢板厚度为1.5MM；

风机风管采用PP材料制作，有较强的抗腐蚀抗老化性能,风量1200立方米/小时；

采用台面异味上排风下抽吸风设计，能够高效的对有害气体进行排放，保护工作人员的身体健康；

低噪音离心风机强力排风，可接管道排出室外；

磁性吸附工具架可以将金属取材设备和解剖器材吸附在上面方便取用；

40W日光灯组照明及紫外线灭菌灯，提供有效照明和灭菌；



取材台安装示意图


安装顺序根据序号：

- 1、下水管道 (出水 Φ 40·进水 Φ 15)
- 2、电线 (进线2.5平方)
- 3、风机组件
- 4、通风管道

注：输入电压·频率50Hz

订货号

货号	: 900-00-00
型号	: PW900
名称	: 取材台PW900
外型尺寸(长*宽*高)	: 1800mm*850mm*2200mm
电源	: 220V~ 50Hz

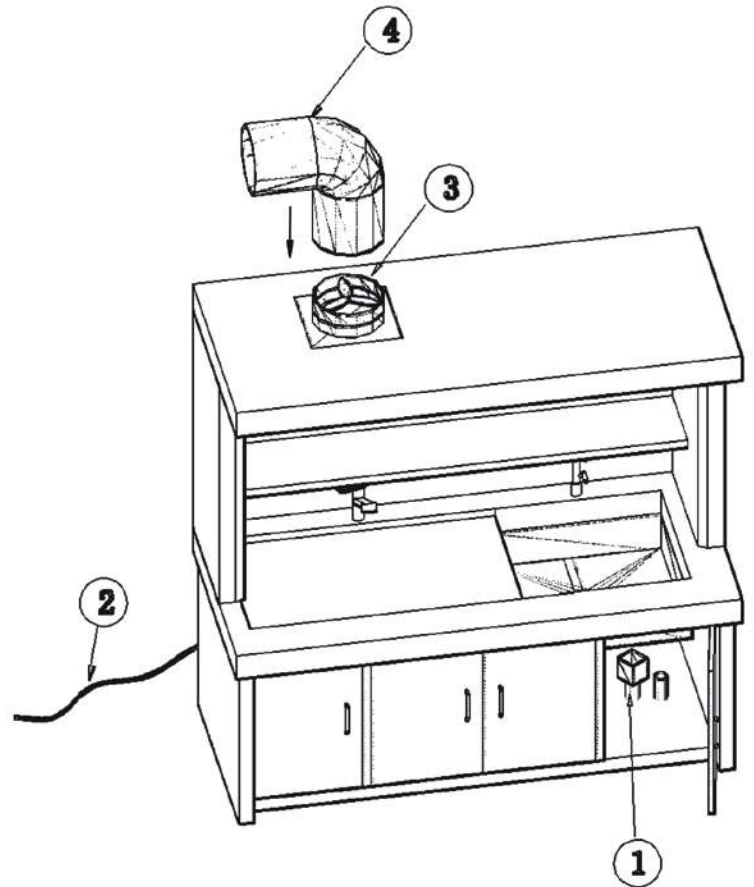

维格斯仪器系列



标本冷藏柜 SF736



冷冻切片机 C5500



轮转式切片机 M3055

*图片只供参考·产品以实物为准。

广州维格斯生物科技有限公司

地址:广州市增城新塘沙浦银沙工业区银沙二路4号

邮编: 511388

电话: 8620-8779 3718

传真: 8620-8779 3728

邮箱: marketing@wexisgp.com

www.wexisgp.com

