

# Wexis

## C5500冷冻切片机


### 模块化控制系统

手动/自动除霜、休眠  
紫外线消毒  
半导体制冷



### 宽敞的冷冻操作空间

冷冻室可同时容纳20个标本  
配备废片槽和置物架

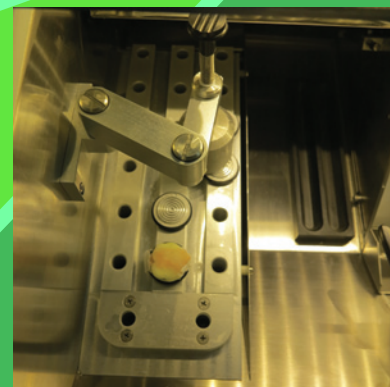

### 美观、操作舒适的外观设计

人机工程学一次性注塑成型外壳  
彩页液晶触摸屏  
防雾电加热玻璃门



### 优越的切片性能

手轮手感轻快，带锁定装置；  
标本头角度可调，支持快速回到中心位；  
回缩功能；  
德国进口高精度导轨，运转顺滑，耐用，支持高硬度标本切片；  
刀架支持宽窄刀片；  
刀片夹可左右移动，确保安全和刀片的充分使用；  
防卷板可进行水平、竖直、夹角和缝隙的调整；



## 一般参数

安全类型	I类B型
电压	AC220V±10% 50Hz 或 AC110V±10% 60Hz
输入功率	650V
宽 (不含手轮)	650mm
宽 (含手轮)	780mm
厚度	700mm
高度	1152mm
重量	140kg

## 制冷参数

冷冻室	
温度设定范围	-10 ~ -35°C
化霜形式	手动/自动
制冷量	690W
制冷剂	R404a,300g±5g
速冻台	
最低温度	-45°C
冷冻点数目	18个
半导体冷冻点数目	2个

## 切片参数

类型	设定值	步进量
切片厚度设定范围 0μm~100μm	0μm~10μm	1μm
	10μm~20μm	2μm
	20μm~50μm	5μm
	50μm~100μm	10μm
修片厚度设定范围 0μm~500μm	0μm~20μm	2μm
	20μm~50μm	5μm
	50μm~100μm	10μm
	100μm~500μm	50μm
标本前后行程	25mm	
最大标本尺寸	59mm	
最大标本尺寸	55*55mm	
最大标本卡头调整角度	12°	
标本快进快退速度	0.7mm/s	



M3050石蜡切片机



M3055石蜡切片机



C5200冷冻切片机

广州维格斯生物科技有限公司

地址:广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路4号

邮编: 511388

电话: 8620-8779 3718 传真: 8620-8779 3728

维格斯集团有限公司

地址:香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室

电话: 852-2567 2882 传真: 852-2567 6333

www.wexisgp.com