


Wexis

M3050石蜡切片机

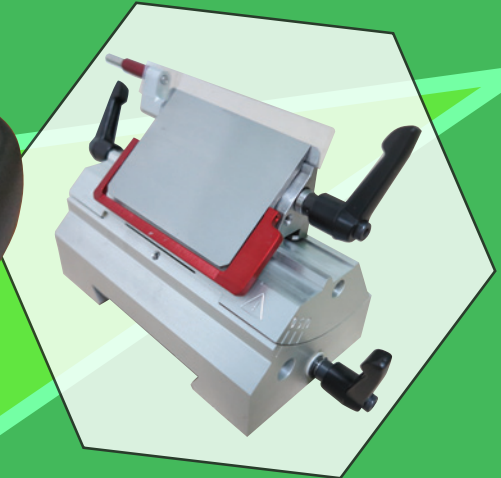

安全、便捷、舒适的操作功能

刀片夹可横向移动，无需手动移动刀片，避免了危险性；
手轮平衡精细调节系统，保证手轮转动轻快，手感舒适；
锁定装置位于手轮，操作方便快捷；
进口零间隙滑动导轨，免润滑，免维护，无噪音



先进精密的微动进样系统

采用国际最先进的无机轮传动的微动进给，确保了精密微动进给传动的精准度
样品头X、Y轴8°调节，精准定位



人机工程学和美观的外形

流线美观外形，磁吸式废片槽，方便拆装清洗

技术参数

切片厚度设定范围：	1~60 μ m
可选择厚度值：	0.5 μ m~2 μ m · 步进量0.5 μ m； 2 μ m~10 μ m · 步进量1 μ m； 10 μ m~20 μ m · 步进量2 μ m； 20 μ m~60 μ m · 步进量5 μ m； 厚度误差： \pm 20%。
标本水平运动行程：	23mm
标本垂直运动行程：	53mm
标本钳调整角度：	8°
刀架前后移动距离：	25mm
外形尺寸（长*宽*高）：	550*465*280mm
整机重量：	25kg



M3055石蜡切片机



C5200冷冻切片机



C5500冷冻切片机

广州维格斯生物科技有限公司

地址:广州市增城区新塘沙浦银沙工业区银沙二路4号

邮编: 510500

电话: 8620-8779 3718 传真: 8620-8779 3728

维格斯集团有限公司

地址:香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室

电话: 852-2567 2882 传真: 852-2567 6333

www.wexisgp.com

Wexis